
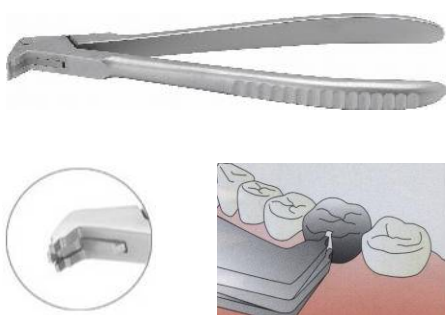


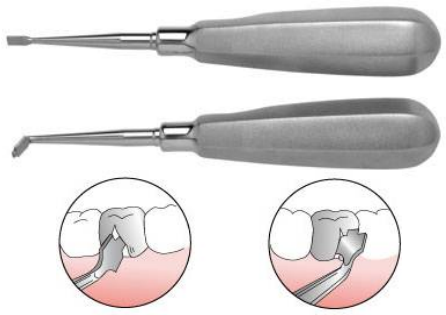



# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器  
小分類名：クラウン用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)YDM
商品名	クラウン スプリッティング プライヤー	リムービング ドライバー	クラウン スリッター
	 <p>左右均等に広げられるので、支台歯に負担がかからず動揺歯にも使用できます。</p> <p>■ 包装：1本</p>	 <p>エレベータータイプのクラウン撤去用リムーバーで、メタルボンドの撤去用としても使用できます。てこの作用を応用し、スムーズに撤去できます。</p> <p>■ 種類：S(直)、C(曲) ■ 包装：各1本</p>	 <p>■ 包装：1本</p>
規格			
定価	¥24,000	各 ¥ 8,800	¥12,000
メーカー	(株)YDM	(株)タスク	(株)タスク
商品名	コーヌス クラウン プライヤー	クラウン スリッター	メタルクラウン リムーバー
	 <p>外冠の試適後、内面を確認・脱去する際に使用します。 ※先端には使用済のダイヤモンドバーを使用します。</p> <p>■ 包装：1本</p>	 <p>ハサミ型。</p> <p>■ 包装：1本</p>	 <p>操作方法が非常にシンプルで、スピーディーな撤去を実現。バーでの切削範囲も僅かですみす。 </p> <p>■ 包装：1本</p>
規格			
定価	¥15,800	¥15,000	¥21,000
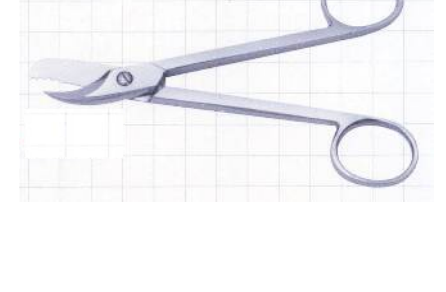
# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器



小分類名：クラウン用

メーカー	(株)タスク	(株)タスク	デンツプライシロナ(株)
商品名	クラウンリムーバー	KAKOプライヤー	クラウンオープナー
	 <p>ハンドルを握ると先端部が左右に開きます。クラウンを中から押し広げる構造ですから、支台歯への負担が少なく、動揺歯に有効です。</p> <p>■包装：1本</p>	 <p>切削器具を使わずに、歯冠修復物や暫間修復物を除去できます。インレー、鑄造冠、コア、ブリッジ等々</p> <p>■種類：#1（前歯部用） #2（臼歯部用） ■包装：各1本</p>	 <p>クラウン・ブリッジ撤去用鉗子。</p> <p>■包装：1本</p>
規格			
定価	¥23,000	（販売終了）	¥17,330
メーカー	(有)木村鉗子製作所	(有)木村鉗子製作所	ノードेंट社／ヨシダ
商品名	クラウン撤去プライヤー	ハートマンプライヤー	クラウンリムーバー #CRN134
	 <p>咬合面に穴を開け、マージンにかけて撤去します。撤去後はテンポラリークラウンとして利用できます。</p> <p>■包装：1本</p>	 <p>クラウンをカットし、ハンドルのドライバー部で緩めてマージンに爪をかけて撤去します。</p> <p>■包装：1本</p>	 <p>（歯周用ホー） 左右非対称の刃部は口腔内の上下左右すべての部位に使用でき、使用範囲が広く作業効率を高めます。刃部先端の厚みは約1mm。</p> <p>■包装：1本入</p>
規格			
定価	¥22,000	¥22,000	¥12,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器  
小分類名：クラウン用

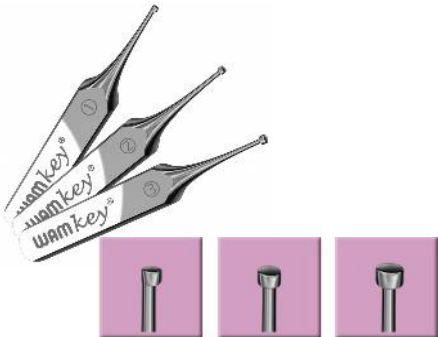メーカー	クロスフィールド(株)	(株)フォレスト・ワン	
商品名	ワムキークラウンリムーバー	イージークラウンリムーバーキット	
	 <p>ワムキークラウンリムーバーNo.1 を穴の一番奥まで入れ、クラウンを外すために器具をやさしくひねります。作業はクラウンの厚みに関係ありません。</p> <p>■種類：#1、2、3 ■包装：各1本入</p>	 <p>スぺーサー      メタルリムーバー      ラチェット</p> <p>補綴物を削らず、再利用可能な状態で取り外せます。クラウン等の補綴物を撤去する際、補綴物の咬合面に小さな穴をあけるだけで撤去が可能。</p> <p>■包装： キット(スぺーサー・ラチェット メタルリムーバー)</p>	
規格			
定価	各 ¥ 20,000	¥70,000	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器

小分類名：テンポラリー用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)YDM
商品名	クラウングリッパー	クラウンリムービングPRO 上顎前歯用	クラウンリムービングプライヤーPRO
	 <p>ハサミタイプでテンポラリークラウンをラクに撤去できます。適度になるハンドルで、保持感覚が伝わります。クラウン保持部に細かい溝を付与した超硬チップが付いているため、滑らずにしっかりと掴めます。 ■包装：1本</p>	 <p>試適クラウンを壊さず、傷つけずに撤去できます。破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効。 ※UAチップ 5個入 ¥2,000 ■包装：本体+チップL(唇側用)、P(口蓋側用)各5入</p>	 <p>試適したクラウンを壊さず、傷をつけずに撤去します。破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。 ※先端チップ ¥2,000 ■包装：本体 チップ10入</p>
規格			
定価	¥19,800	¥28,000	¥28,000
メーカー	(株)YDM	(株)タスク	(株)タスク
商品名	テンポラリークラウン 撤去プライヤー	テンポラリークラウンリムーバー 富井式	テンポラリークラウンリムーバー 富井式
	 <p>テンポラリークラウンの最大豊隆部をつかみます。先端部が食い込むので滑らず、つぶさずに撤去できます。歯肉・支合歯に損傷なく撤去できます。 ■包装：1本</p>	 <p>【タイプⅠ ショート】 隣在歯に支点を置いて撤去する新しい発想のテンポラリークラウンリムーバーです。180度可動式の支点なので、あらゆる角度の撤去に対応できます。 ■包装：1本</p>	 <p>【タイプⅡ ロング】 隣在歯又は歯槽頂に支点を置いて撤去する新しい発想のリムーバー。振動が伝わりにくいため、患者様の痛みを大幅に軽減します。可動式なので、あらゆる角度の撤去に対応できます。</p>
規格			
定価	¥18,000	¥21,000	¥21,000



# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器

小分類名：テンポラリー用

メーカー	(株)タスク	(株)ジーシー	(株)マイクロテック
商品名	テンポラリークラウンリムーバー 富井式	リムーバルプライヤーK.Y.型	クラウンエクストラクション プライヤーセット
	 <p>先端部長さ約19mm</p> <p>【タイプⅢ ショート】 隣在歯又は歯槽頂に支点を置いて撤去する新しい発想のリムーバー。振動が伝わりにくいため、患者様の痛みを大幅に軽減します。可動式なので、あらゆる角度の撤去に対応できます。</p>	 <p>小さく鋭いピンを埋め込んだヤスリ目仕上げの先端を持つプライヤー。アームの形状も独特で、テンポラリークラウンや試適されたメタルコアなどの撤去がスムーズに行えます。</p> <p>■包装：1本 他</p>	 <p>■種類：ストッパー付、ストッパー無し ■包装：各1本(チップ、パウダー付)</p>
規格			
定価	(取り扱い中止)	¥14,800	(付) ¥39,500 / (無) ¥37,000
メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	(有)木村鉗子製作所	リッチウイル社／茂久田商会
商品名	クラウンリムービングプライヤー シリコンチップ付	テンポラリー撤去プライヤー	クラウンリムーバー
	 <p>先鋒のシリコンチップでクラウンを優しく除去</p> <p>■包装： プライヤー 全長140mm 1本 プライヤーチップ 10個入 ¥1000</p>	 <p>嚙部内側の円錐状の剣でテンポラリークラウンを好きな角度で滑らずに把持できます。</p> <p>■包装：1本</p>	 <p>歯牙や修復物に損傷を与えず、クラウン・インレー・ブリッジを除去します。試適の段階で外れなくなってしまった場合にも、ぜひ1度ご活用ください。オートセラミックスやインプラント試適時の破損防止にも有効です。</p> <p>■包装：36個入</p>
規格			
定価	¥8,000	¥14,000	¥3,350

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器

小分類名：ポスト・コア用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)YDM
商品名	メタルコア リムービングダブルドライバー	メタルコアリムービングプライヤー	ポストコア リムーバー タイプ2
	  <p>力を頬舌側から均等に歯軸方向へ作用させるため、歯質への襲撃が少なく、前歯部から臼歯部まで部位を選ばずにアクセスできます。2本(直・曲)のドライバーで安全かつスムーズにメタルコアを撤去。ドライバーの先端の厚み 0.4mm  <b>■種類:</b> 直(頬側用)、曲(舌側用)  <b>■包装:</b> 各1本</p>	 <p>先端に角度(75°)を付けているため、臼歯部にもアプローチしやすいリムービングプライヤーです。  <b>■包装:</b> 1本</p>	 <p>ハンドルに【バネ】がつきました！ハンドルの可動範囲が限定され、安定した操作ができます。把持力の調整がしやすく、過剰な力が加わるのを防ぎます。  <b>■包装:</b> 1本</p>
規格			
定価	各 ¥ 9,680	¥26,400	(取り扱い中止)
メーカー	(株)YDM	(株)タスク	(株)タスク
商品名	スクリューポスト撤去鉗子 曲	スクリューピンリムーバー LH	U POST REMOVAL フォーセプス
	  <p>スクリューピン・ポストを確実に把持できる内面構造です。先端がコンパクトで、回しやすくなっています。  <b>■種類:</b> 曲  <b>■包装:</b> 1本</p>	 <p><b>■種類:</b> タイプ I (前・臼歯部兼用)          タイプ II (臼歯部用)          タイプ III (前歯部用)  <b>■包装:</b> 各1本</p>	 <p>メタルコア除去用プライヤー。メタルコアのマージン部にバーでスリットを入れ、プライヤー先端部をスリットに合わせ、軽くハンドルを握りこむとメタルコアが浮き上がって除去できます。  <b>■種類:</b> ストレート          カーブ  <b>■包装:</b> 各1本</p>
規格			
定価	¥18,960	各 ¥ 21,000	各 ¥ 25,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器

小分類名：ポスト・コア用

メーカー	(株)タスク	(有)木村鉗子製作所	(有)デントレード
商品名	U POST REMOVAL フォーセップス	兼松式合釘抜去鉗子	スクリューポストリムーバー
	 <p>メタルコア除去用。 メタルコアのマージン部にバーでスリットを入れ、プライヤー先端部をスリットに合わせ、軽くハンドルを握り込むとメタルコアが浮き上がり除去。 ■種類：ストレート、カーブ ■包装：各1本</p>	 <p>2丁組 No1 外鉗子 No2 内鉗子 No3 小臼歯 継続歯の冠部が破損して、根面上に合釘(ポスト)が突出している場合に、これを引き抜くのに極めて便利な鉗子です。 ※根面保護板 ¥1,170 ■包装：#1、2(2本組) #3 1本</p>	 <p>先端のチャックがスクリューポストを確実に把持し、除去することができるリムーバーです。頭部のローレットを左回転(逆ネジ)することでチャックが締めまり、さらに左回転することでスクリューポストが除去できます。 ■包装：本体一式</p>
規格			
定価	各 ¥ 25,000	(1、2組) ¥ 20,000 / (3) ¥ 11,500	¥10,000
メーカー	(株)フォレスト・ワン	クロスフィールド(株)	山添デンタル(株)
商品名	コアリムーバブルドライバー	ワム X 金属コア除去イントロキット	合釘抜去器(チタンコーティング)
	 <p>前歯、臼歯ともに使用可能なメタルコア除去用ドライバーです。コア形状を問わずに使用可能。先端の凹みでコアをしっかりと把握できます。直・曲の組み合わせでストレスなくアクセス可能です。 ■種類：直、曲 ■包装：各1本</p>	 <p>支台歯への負担が少なく心地よい処置を提供できます。使いやすいユニークなデザインで臼歯部を含むほとんどのケースの金属コアを除去できます。 ■包装：フォーセップス(衝撃吸収ネジ付) プロング 計 6個 (S×2、M×2、L×2) シリコンリング 3サイズ</p>	 <p>ポストを先端部でつまみ、蝶ネジで締め上げ本体のツマミを回転させると簡単にポストを除去することが出来ます。本体はチタンコーティング加工を施してあります。 ■種類：タイプA(上) タイプB(下)</p>
規格			
定価	(直) ¥ 14,000 / (曲) ¥ 16,000 / (3本) ¥ 38,000	¥129,000	(取り扱い中止)









# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器

小分類名：金属片用


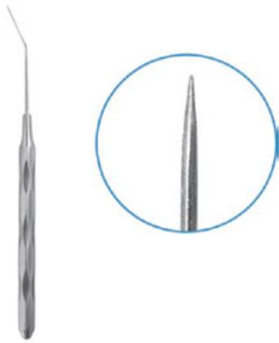

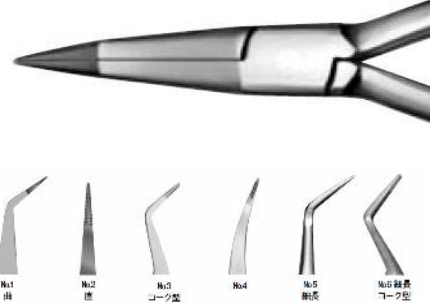
メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)タスク
商品名	クレンザー鉗子	ルートキャナルプライヤー	クレンザー鉗子
	 <p>狭い根管にも挿入できるよう、可能な限り先端を細く改良しました。破折リーマーの除去やガッタパーチャポイントの移送にも有効。  <b>■種類:</b> 直(前歯用)  曲(臼歯用)  <b>■包装:</b> 各1本</p>	 <p>破折リーマーやペーパーポイントなど確実に把持できます。  <b>■包装:</b> 1本入</p>	 <p>根管内の残存リーマー、ファイルの除去に有効です。  <b>■種類:</b> タイプ I (ミゾ付)、  タイプ II (ギザ付)  <b>■包装:</b> 各1本入</p>
規格			
定価	各 ¥ 18,000	¥24,000	(取り扱い中止)
メーカー	サンデンタル(株)	(株)ビー・エス・エー・サクライ	クロスフィールド(株)
商品名	SDマイポストブラシ	BTR PEN	マイクロフォーセプス
	 <p>根管内の異物をスピーディに取り除き清掃します。テンポラリーやその他の不純物を除去し、ポストの脱離・歯根破折・感染根管を防ぎます。補綴物を継続的に保持し、維持力を高めます。  <b>■種類:</b> #1(径2×12mm)、#2(径3×12mm)、#3(径3×15mm)  <b>■包装:</b> 各12本入</p>	 <p>根管内で破折したファイルを容易に取り除くことができるベストインストゥルメント。φ0.3mm径の標準チップ内を通る「Nitinol」ワイヤーは直径φ0.0762mmと髪の毛の太さながら、引っぱり強度1.5kgと究極の耐久性を持つ最先端の形状記憶合金ワイヤーです。チップは4種類。  <b>■包装:</b> セット/チップ(5本入)</p>	 <p>簡便で除去率の高い破折ファイル除去器具。狭く、除去が難しい角度からでも把持しやすいように工夫された3本の先端部で異物に対して最大45度の挿入角からの安定した把持が可能。  <b>■包装:</b> 1本</p>
規格			
定価	各 ¥ 3,000	(セット) ¥ 125,000 / (チップ) ¥ 9,500	¥140,000



# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：撤去器  
小分類名：金属片用

メーカー	クロスフィールド(株)	クロスフィールド(株)	クロスフィールド(株)
商品名	フォーセップス	マイクロ プローブ	マイクロ レバー
	 <p>安定した破折ファイル除去器具。 鋸歯状に加工された把持面と、60 度の角度と細く長い作業部が少ないストレスで根管内へ挿入でき、細い作業部により深部への挿入が可能。</p> <p>■ 包装:1本</p>	 <p>簡単な破折ファイル除去器具。 除去の難しい根尖部も、根管の形状や破折ファイルの位置などに合わせてマイクロ プローブを曲げ、マイクロ レバーと挟むことで様々な症例に対応可能。</p> <p>■ 包装:1本</p>	 <p>簡単な破折ファイル除去器具。 除去の難しい根尖部も、根管の形状や破折ファイルの位置などに合わせてマイクロ プローブを曲げ、マイクロ レバーと挟むことで様々な症例に対応可能。 ※先端部の円筒形部にマイクロ プローブ(別売)がフィット。</p> <p>■ 包装:1本</p>
規格			
定価	¥35,000	¥15,000	¥20,000
メーカー	(有)木村鉗子製作所		
商品名	ピンセットプライヤー		
	 <p>根管内で折れているクレンザー、リーマーの除去の把持に、根管内でのスクリューボスの撤去に、矯正ワイヤー、ブラケットの把持に、破折した残根先端部の除去に最適。 ※ダイヤ付も有ります。</p> <p>■ 種類: #1、2、3、4、5、6 ■ 包装: 各1本</p>		
規格			
定価	(1、2、4) ¥13,000 / (3、5、6) ¥14,000		